

LUNA[®] X5

Fiche d'instruction

Contrôle manuel

On


Le voyant vert s'allume lorsque le lève-personne est actif. Tous les voyants s'éteignent après environ 3 minutes d'inactivité.

Haut

Bas

Remise à zéro

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour désactiver l'arrêt d'urgence. Le voyant s'éteint et tous les boutons fonctionnent à nouveau.

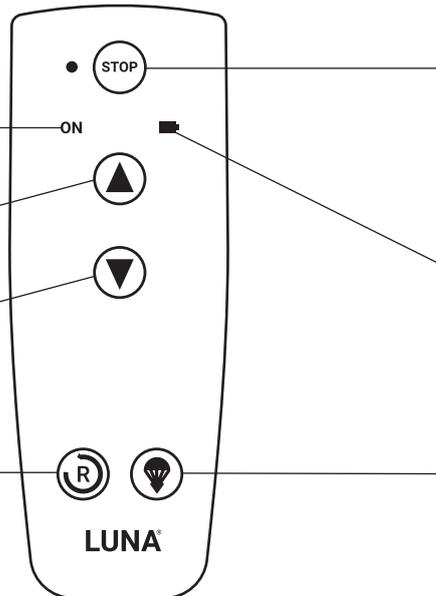

Arrêt d'urgence

Appuyer pour activer l'arrêt d'urgence. Le voyant rouge indique l'activation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour désactiver l'arrêt d'urgence.

Batterie

- Vert: 100%
- Orange: 50% (recharge est recommandée)
- Rouge: Doit être chargé

Atterrissage d'urgence

Si les fonctions Haut/Bas ne fonctionnent pas. Appuyez sur le bouton d'abaissement d'urgence et maintenez-le enfoncé ; l'abaissement commence après 5 secondes. Un signal sonore constant retentit pendant l'abaissement.

Important

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le LUNA[®] X5 peut être rechargé à l'aide d'un chargeur :

- Placez la commande manuelle dans la station de charge.
- Connectez le câble du chargeur au panneau latéral.


Si le système de piste est équipé de la fonction ITC (In-Track Charging), le chargement se fait automatiquement.

Atterrissage d'urgence

Si l'abaissement d'urgence électrique ne fonctionne pas.

Utilisez l'abaissement d'urgence manuel en suivant les étapes suivantes :

- a. Retirez la clé d'urgence située sur le côté du LUNA[®] X5.
- b. Insérez la clé manuelle d'urgence dans le trou de serrure.
- c. Tournez la clé de secours manuelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaissement manuel.

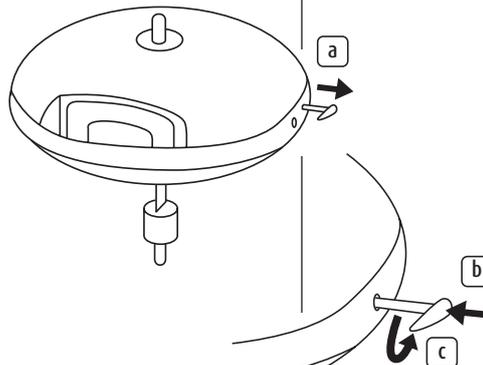

Utilisez la hauteur réglable du lit pour faciliter le transfert.



Ne tirez pas sur le câble de la commande manuelle pour déplacer le lève-personne plafonnier.




Assurez-vous que vous utilisez la taille de harnais adaptée à l'utilisateur.



Scan for information

Panneau latéral

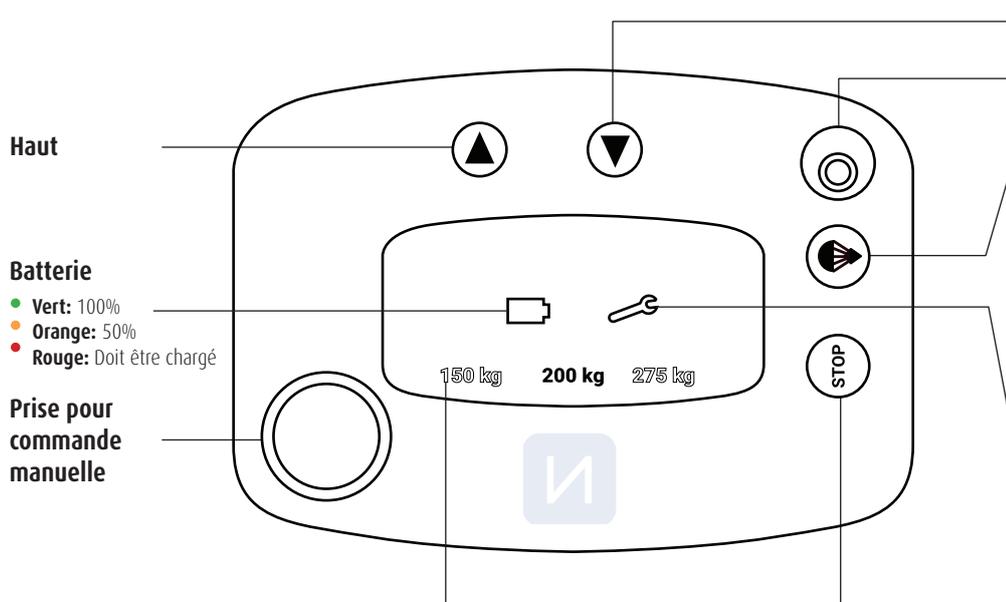

Haut

Batterie

- Vert: 100%
- Orange: 50%
- Rouge: Doit être chargé

Prise pour commande manuelle

Bas

Point de recharge

Atterrissage d'urgence

A utiliser **UNIQUEMENT** dans les situations où il n'est pas possible d'abaisser l'utilisateur normalement.

Si les fonctions Haut/Bas ne fonctionnent pas.

Appuyez sur le bouton d'abaissement d'urgence et maintenez-le enfoncé ; l'abaissement commence après 5 secondes. Un signal sonore constant retentit pendant l'abaissement.

Indicateur de service

Jaune

1 mois jusqu'à l'entretien annuel (s'allume 30 secondes lors de l'activation).

Orange

Service annuel **dépassé d'un mois** (s'allume jusqu'à la mise en veille).

Orange + Bip

Entretien annuel **dépassé de 2 mois** (allumage en mode veille + trois bips lors de l'activation).

L'affichage sur le panneau principal de l'élévateur pivote automatiquement lorsque celui-ci est retourné afin de garantir une lisibilité optimale des indicateurs, quelle que soit la position.

Poids

● Vert
L'ascenseur est réglé sur la capacité de poids sélectionnée.

● Rouge
Le poids dépasse la limite définie. Dans ce cas, l'utilisateur ne peut être abaissé que pour des raisons de sécurité.


Arrêt d'urgence

Appuyer pour activer l'arrêt d'urgence. Le voyant rouge indique l'activation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour désactiver l'arrêt d'urgence.

Comment déplacer l'ascenseur d'une pièce à l'autre

Pour passer du mode fixe au mode portable, il suffit de retourner l'appareil.

(ou l'inverse)

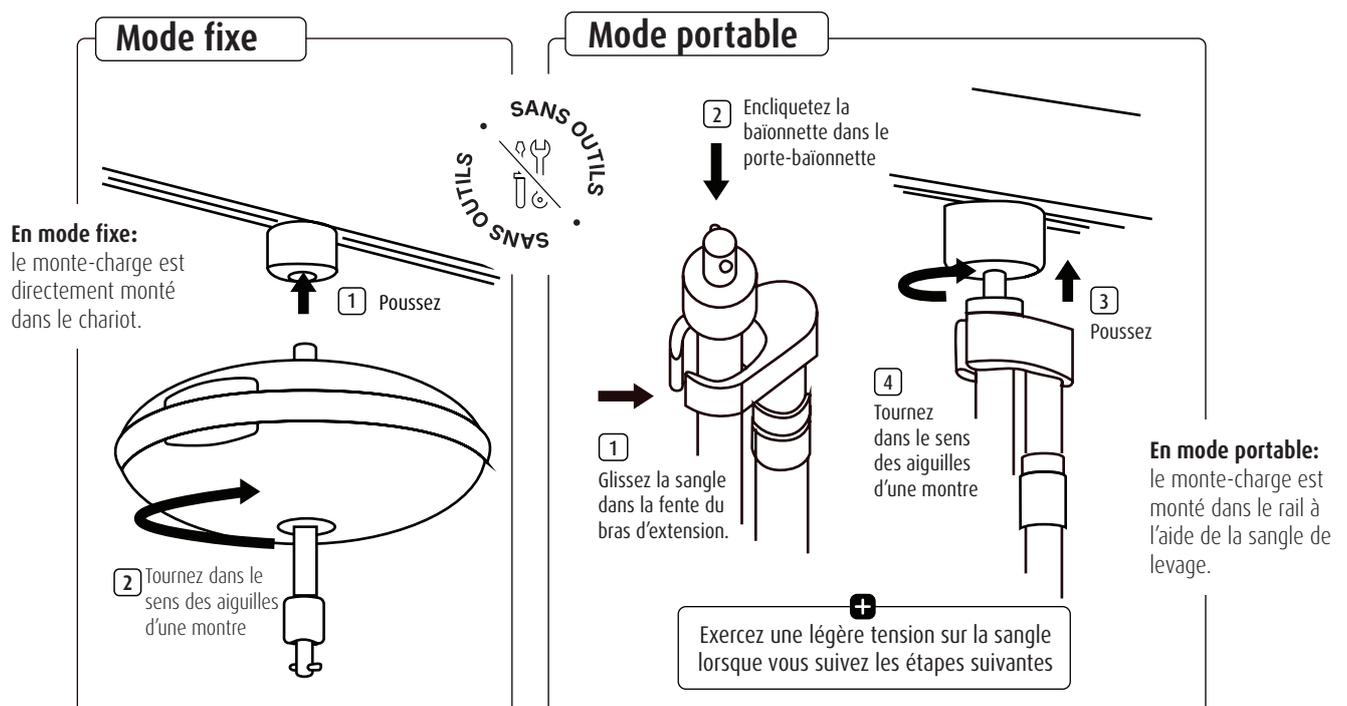

En mode fixe:

le monte-charge est directement monté dans le chariot.

1 Poussez

2 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre

Mode portable

2 Encliquez la baïonnette dans le porte-baïonnette

1 Glissez la sangle dans la fente du bras d'extension.

4 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre

3 Poussez

En mode portable: le monte-charge est monté dans le rail à l'aide de la sangle de levage.

Exercez une légère tension sur la sangle lorsque vous suivez les étapes suivantes