



Creating balance in healthcare



Sirocco Brancard de douche



6100 2400 / 6100 2401

Sirocco Brancard de douche



6100 2400 / 6100 2401

Sirocco Brancard de douche fixation murale

Le brancard de douche est un équipement ergonomique pour soigner et faire la toilette de clients. Le confort est optimal, tant pour le client que pour le soignant.

Lopital livre des brancards de douche dans plusieurs versions. A savoir des brancards à fixation murale, des brancards de douche mobiles et des brancards de douche non mobiles. Certaines versions sont dotées d'un réglage électrique ou hydraulique de la hauteur.

L'utilisation du brancard de douche est polyvalente et s'associe aux autres accessoires, tels que les lits, les chaises roulantes et de douche, les lève-personnes et matériels de transfert, comme EasySlide. Il s'agit des fonctions essentielles du brancard de douche.

- Charge maximale 150 kg.
- Réglage électrique de montée / descente.
- Commande manuelle simple.
- Uniquement pour salles de bains avec une hauteur minimale de 230 cm.
- Avec station de chargement des batteries (fixation murale)
- Batterie facile à changer.
- Arrêt d'urgence.
- Descente d'urgence
- Supports corps, tête et pieds en polycarbonate.
- Matelas avec bordures de 20 cm.
- Réglage montée / descente par commande manuelle..
- Barrière de sécurité articulées avec revêtement inox.
- Appareil entièrement fabriqué en acier revêtu et muni de bouchons de protection en plastique.
- S'utilise parfaitement comme brancard de douche et table d'habillage.
- Le brancard est muni d'un long tuyau d'évacuation (1,75 m) monté de façon standard (vu du côté de la commande). Un tuyau d'évacuation plus long peut être installé sur demande.
- **Option** : Pack de batteries supplémentaires.



La position la plus basse est 43 cm.



Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave



Batterie amovible.




Opération barrière latérale.



Spécifications techniques

• Charge max.	150 kg	• Boîtier de contrôle	24V DC, max. 25W
• Poids produit	80 kg	• Batterie	24V, max. 250W
• Longueur	200 cm	• Chargeur	230V AC, puissance de raccordement 100W, wandbevestiging
• Largeur	84 cm		
• Hauteur (réglable)	43 à 103 cm		
• Entraînement haut / bas	Actuator 24V DC	• Résistance à l'eau	IPX4

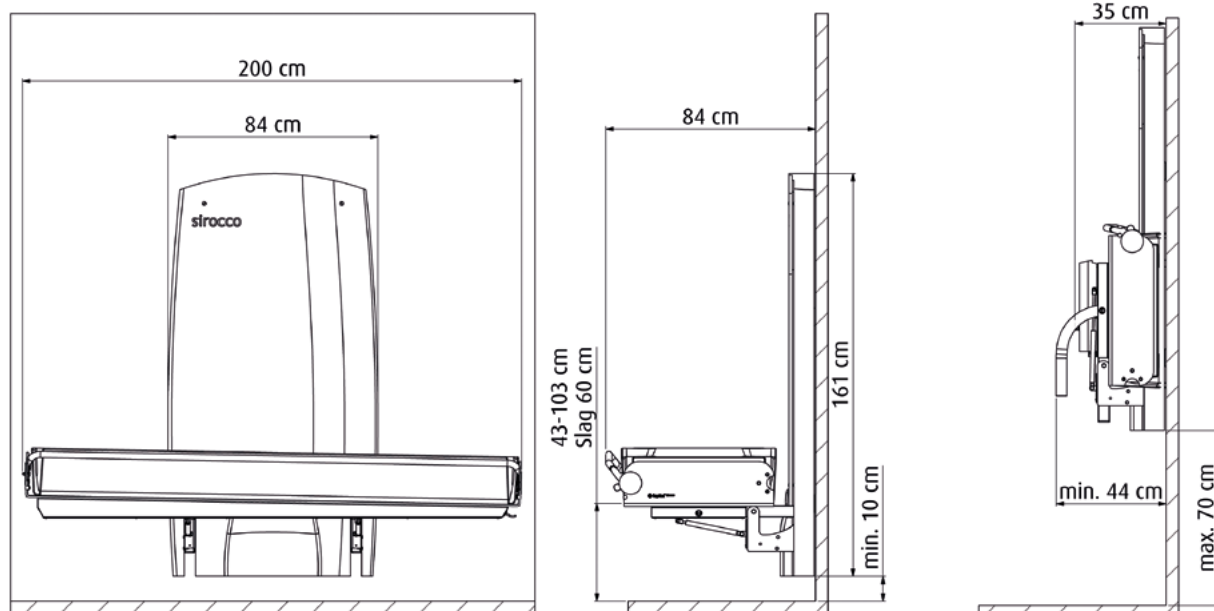

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tél +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.be

Lopital Belgique SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tél +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

