



Creating balance in healthcare



Nemo Chaise de douche-toilette



5100 5100

Nemo Chaise de douche-toilette inclinable



- Charge maximale 150 kg.
- Réglage de l'inclinaison en continu par le biais d'un ressort à gaz jusqu'à maximum 30 degrés.
- Assise rembourrée avec découpe et insert.
- Accoudoirs rembourrés et rabattables pour transfert latéral.
- Dossier et assise de forme ergonomique.
- Appuie-tête / nuque à hauteur qu'en profondeur réglable.
- Repose-pieds rabattables avec protège-mollets.
- Coulisse pour seau de toilette ou bassin.
- 4 roues pivotantes, à frein en matière synthétique.

Options

- Article n° 6840 5660 Accoudoirs avec fermeture avant.
- Article n° 6840 5661 Accoudoirs à double verrouillage.
- Article n° 6950 1104 Bassin en plastique avec couvercle.
- Article n° 6950 1120 Ceinture de sécurité.
- Article n° 6950 5624 Dossier en platilon.
- Article n° 6950 5625 Siège en platilon.
- Article n° 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.
- Article n° 6975 8045 Ceinture avec quatre points de sécurité.
- Article n° 7500 5693 Mécanisme d'élévation 10 à 30 mm.
- Article n° 7556 0025 Roue directionnelle gauche avant.

5100 5100

Nemo Chaise de douche-toilette inclinable

La Nemo de Lopital est une chaise de douche-toilette mobile inclinable qui a été développée pour donner aux utilisateurs et aux soignants un maximum de sécurité et de soutien pendant la douche et les soins. La Nemo peut également être utilisée comme chaise de toilette, en utilisant une baignoire / un seau ou en combinaison avec une toilette.

La Nemo se compose d'un châssis et d'une section de siège. La section de siège a le même confort qu'une chaise normale et offre le même support adéquat. En ce qui concerne le châssis, la partie siège peut être inclinée de 30 degrés en continu à l'aide d'un ressort à gaz. Cela rend la Nemo multifonctionnelle lors de l'utilisation.

La Nemo est équipée d'un support tête / cou réglable en hauteur et en profondeur. La chaise est équipée d'accoudoirs droits pliables indépendamment et les repose-pieds ergonomiques sont escamotables et amovibles.



Option: Article n° 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.



Convient pour des personnes présentant un handicap léger à grave



Facile à utiliser au moyen de la poignée de commande.



Ressort à gaz pour le réglage en continu du siège de douche-toilette.



Option : Article n° 6950 1104 Bassin en plastique.



Option : Article n° 6840 5660 Accoudoirs avec fermeture avant.



Modèle standard équipée d'un appui-tête / nuque réglable en hauteur et en profondeur.



Repose-pieds escamotables et amovibles.







Position normale.



Basculement jusqu'à maximum 30° en arrière.

Spécifications techniques

- Charge max. 150 kg
- Poids produit 24 kg
- Largeur d'assise 47 cm
- Profondeur d'assise 44 cm
- Hauteur d'assise 54 cm
- Longueur totale du châssis 100 cm
- Largeur totale du châssis 66 cm
- Appuie-tête / nuque réglable profondeur / hauteur 7 / 12 cm
- Rayon de braquage 112 cm
- Réglage d'inclinaison du dossier 0 à 30 degrés

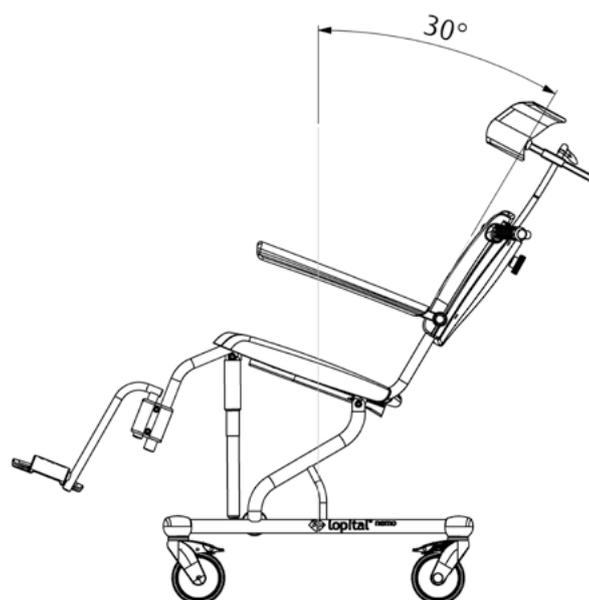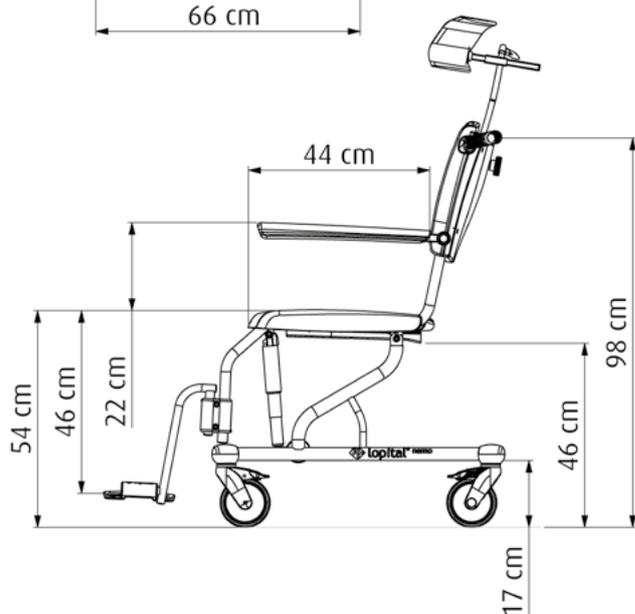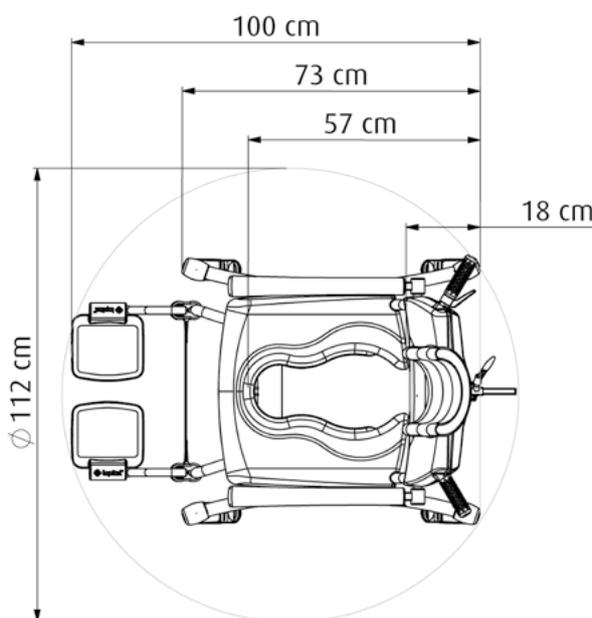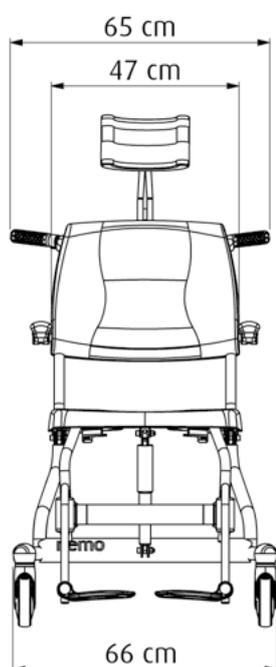

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tél +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.be

Lopital Belgique SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tél +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

