

**Sangles &
Accessoires**



« La sangle constitue la moitié du lève-personnes »

Nous vous proposons un large assortiment de sangles et d'accessoires de soulèvement. Ils se distinguent par l'importante diversité au niveau des matériaux, des modèles et des dimensions, ce qui fait que vous pouvez toujours utiliser votre lève-personnes et votre lève-personnes plafonniers dans toutes les circonstances, avec la bonne sangle.

Avec les bonnes sangles et les bons accessoires, le personnel peut faire face facilement, en toute sécurité et sans le moindre problème à toutes les situations de soulèvement ou de déplacement. Les sangles comprennent une série de solutions pour soulever les clients en position debout, assise ou horizontale. Chaque modèle a des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux différents besoins.

Le choix du matériau représente un important élément lorsqu'il s'agit d'acheter une sangle. Nos sangles sont fabriquées dans différents matériaux, qui disposent chacun de propriétés spéciales. Le matériau le plus utilisé est le polyester vert, qui résiste aux poussières, aux usures et qui est durable. La faible

friction fait en sorte que la sangle peut facilement être installée et enlevée. Pour le bain et la douche, nous recommandons une sangle dans le matériau Plastic Coated. Lorsque la sangle doit rester en dessous du client, nous recommandons le polyester gris. Il est aéré et est un bon choix comme bande de séjour.

La dissémination de plusieurs bactéries résistantes (MRSA) dans les soins de santé a entraîné le développement d'une série de sangles jetables.





Étriers et sangles
forment une unité
fonctionnelle et sûre.



Sangles pour la marche

Réapprendre à marcher ou soutenir un trajet de revalidation avec une formation à la marche est facilité aussi bien pour le client que pour le personnel soignant grâce à l'utilisation d'une sangle de Lopital. La possibilité de se lever et de charger le squelette et les muscles est non seulement bonne pour la santé au niveau physique, mais cela confère également un sentiment de libération et de davantage de confiance. Avec les accessoires de soulèvement de Lopital, nous proposons de nouvelles possibilités pour pouvoir se lever et se déplacer.



N° d'article	Description de l'article	Numéro de modèle	Matériau	Bon équilibre du tronc	Réduction de l'équilibre du tronc	Soutien au niveau du cou et de la tête	Soulever du sol	Toilette	Amputation	Sensible à la douleur	Fonction debout réduite	Couché	Bain / Douche	Bande de séjour	Formation à la marche
2403564011X	Veste Master avec une fermeture avant poly	640	Polyester		•						•				•
2403592032X	Pantalon de soulèvement poly net	920	Polyester net		•						•				•

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.
Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».

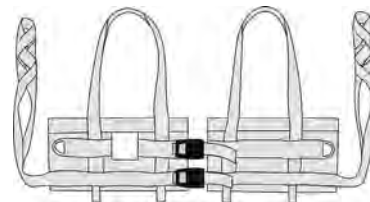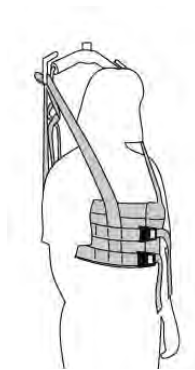


Modèle 640 Veste Master

- Fermeture avec des clips à l'avant.
- Réglable à l'avant pour le buste et l'estomac.
- Pour les clients qui savent tenir debout.
- Bandes pour les jambes (accessoires), cela peut être approprié pour certains clients.

Modèle 920 Pantalon de soulèvement

- Pour les clients qui peuvent tenir debout seuls.
- Sécurisé et fiable pour se mettre debout, marcher, courir et pour la formation à l'équilibre.
- Pour des mouvements naturels lorsque l'on se met debout.
- Pantalon de soulèvement ultra, modèle 920 développé pour la formation ambulatoire des clients en bariatrie.

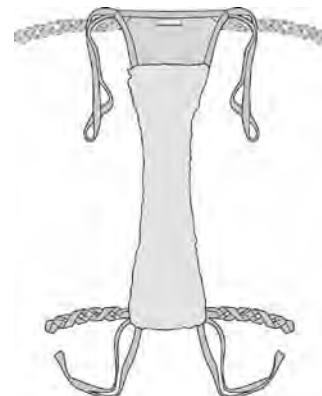

Sangles pour être assis

Le soulèvement dans une position assise est l'un des soulèvements les plus courants. Mais, étant donné que chaque corps est différent, nous proposons également un large assortiment de différentes sangles. Avec une sangle qui supporte tout le corps, ce déplacement se fait de la manière la plus confortable, aussi bien pour le client que pour le personnel soignant.



N° d'article	Description de l'article	Numéro de modèle	Matériau	Bon équilibre du tronc	Réduction de l'équilibre du tronc	Soutien au niveau du cou et de la tête	Soulever du sol	Toilette	Amputation	Sensible à la douleur	Fonction debout réduite	Couché	Bain / Douche	Bande de séjour	Formation à la marche
2403500011X	Universal tilband poly verst	000	Polyester	•						•					
2403500031X	Universal tilband poly net verst	000	Polyester net	•						•				•	
2403500040X	Universal tilband plastic co verst	000	Plastic coated	•						•			•		
2403520011X	Original HB tilband poly verst	200	Polyester		•	•	•			•		•			
2403520031X	Original HB tilband poly net verst	200	Polyester net		•	•	•			•		•		•	
2403520040X	Original HB tilband plastic co verst	200	Plastic coated		•	•	•			•		•	•		
2403522060X	Sangle Silhouet poly net	220	Polyester net		•	•	•			•		•		•	
2403530030X	Sangle Comfort Plus poly net	300	Polyester net	•			•			•		•		•	
2403535030X	Sangle Comfort Plus HB poly net	350	Polyester net		•	•	•			•		•		•	
2403540013X	Sangle Hygiene verst poly	400	Polyester	•				•							
2403545013X	Sangle Hygiene avec clip de sécurité	450	Polyester	•				•							
2403550011X	Veste hygiène poly verst	500	Polyester		•			•							
2403575011X	Sangle amputation HB poly	750	Polyester		•	•	•		•	•				•	

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.

Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».

Modèle 000

Sangle Universal

- Bon modèle standard, idéal pour la plupart des clients.
- Soutient tout le dos.
- Le client garde ses bras à l'intérieur de la sangle.



Modèle 200

Sangle Original highback

- Bon choix pour le soulèvement à partir d'une position horizontale.
- Offre un soutien pour tout le dos et la tête.
- Position à moitié assise vers l'arrière.



Modèle 220

Bande silhouette

- Une sangle pliable en fibre pour soulever les sièges et les appuis préformés.
- Offre un soutien pour tout le dos et la tête.



Modèle 400

Bande d'hygiène

- Pour les clients avec une bonne stabilité.
- Possibilité de s'habiller et de se déshabiller pendant le soulèvement lors d'une visite aux toilettes.
- Le client garde ses bras à l'intérieur de la sangle.



Modèle 450

Bande d'hygiène

- Pourvue d'une ceinture de sécurité, idéale pour les clients avec une faible stabilité.
- Possibilité de s'habiller et de se déshabiller pendant le soulèvement lors d'une visite aux toilettes.



Modèle 500

Bande d'hygiène

- Convient pour les clients avec un tonus et une spasticité importants / bas.
- Possibilité de s'habiller et de se déshabiller pendant le soulèvement lors d'une visite aux toilettes.
- Soutient et soulève autour de la partie supérieure du corps.



Modèle 300 / 350

Bande Comfort plus


- Approprié pour les clients avec des amputations de jambes et les clients avec des articulations douloureuses.
- Pour un angle ouvert des hanches.



Modèle 750

Bande d'amputation

- Pour les clients avec une amputation du fémur d'un côté ou des deux côtés.
- Offre un soutien pour tout le dos et la tête.
- Position à moitié assise vers l'arrière.

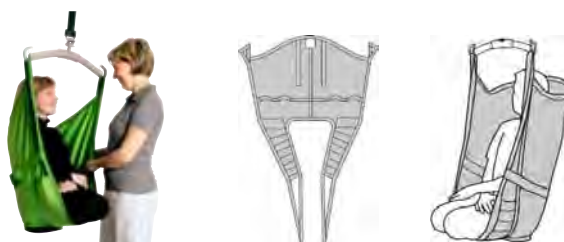

"Chaque modèle a des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux différents besoins."



Labels clairs avec des informations sur le produit



Marquez lors de la première utilisation



Codage clair des couleurs sur chaque sangle



Option : clips de couleur



Multistrap

Dans de nombreuses situations de soins, il est nécessaire de soulever et de maintenir surélevée une partie du corps, par exemple un bras ou un pied. Pour les clients particulièrement lourds, il peut également être nécessaire de soulever le ventre. Avec un ascenseur accroché au plafond, le MultiStrap est l'équipement parfait pour le soulèvement. Également disponible au format jetable.



Handytube

Le HandyTube est un drap qui est principalement utilisé pour mettre un client plus haut dans son lit, le retourner dans son lit ou le déplacer vers un autre lit.



Handysheet

Il peut être très difficile de placer une sangle en dessous d'un client particulièrement lourd. Le HandySheet facilite cela et peut également être utilisé pour de plus petits déplacements dans le lit.



Handybelt

Le HandyBelt facilite les petits déplacements, sans équipement de soulèvement mécanique. La bande est utilisée pour les clients moins mobiles, mais qui ont seulement besoin d'un peu d'aide pour se déplacer.



Reposheet

Il n'est pas facile de tourner et de changer de position les clients lourds pour éviter les escarres. La RepoSheet a une charge maximale de 500 kg. Elle peut également être utilisée avec le système UltraTwin ou par exemple avec un ascenseur mobile Viking. Également disponible au format jetable.

Sangles pour se lever

Le sangle Sabina Opsta est une sangle pratique et multiple, qui s'adresse aux utilisateurs qui peuvent participer activement à la procédure du lever et qui peuvent rester stables après s'être levés. La sangle Sabina Opsta se distingue des autres ascenseurs, grâce aux accessoires bien pensés avec lesquels plusieurs possibilités uniques peuvent être réalisées avec seulement un ascenseur. Pour la Sabina, il y a entre autres deux étriers différents et plusieurs vestes de soulèvement différentes, pour pouvoir adapter le lever aux conditions du client.



N° d'article	Description de l'article	Numéro de modèle	Matériau	Bon équilibre du tronc	Réduction de l'équilibre du tronc	Soutien au niveau du cou et de la tête	Soulever du sol	Toilette	Amputation	Sensible à la douleur	Fonction debout réduite	Couché	Bain / Douche	Bande de séjour	Formation à la marche
2403591013X	Veste de soutien	910	Polyester	•	•			•			•				•
2403593011X	Veste de sécurité	930	Polyester	•	•			•			•				•
2403594041X	Veste de sécurité HB	940	Polyester	•	•			•			•				•


x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.

Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».



Modèle 910
Veste de soutien

- Veste confortable et conviviale.
- Soulève autour du dos et en dessous des bras.
- Recouverte de velours côtelé ce qui fait qu'elle ne peut pas glisser vers le dessus.
- Est utilisée en combinaison avec l'étrier 350.

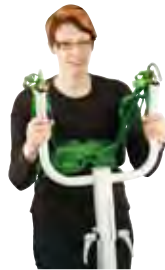

Modèle 930
Veste de sécurité

- Une veste unique en ce qui concerne la sécurité, la forme et la fonction.
- Soulève autour du dos et en dessous des bras.
- Grâce au croisement des bandes, vous pouvez régler la tension de traction au milieu.
- Est utilisée en combinaison avec l'étrier 350.



Modèle 940
Veste de sécurité avec un soutien dans le dos

- Comparable au modèle de sécurité 93, mais pourvue d'un grand dos pour un soutien supplémentaire dans cette zone.
- Est utilisée en combinaison avec l'étrier 350.



Modèle 950
Veste confort

- Convient pour les clients ACV ou les clients éprouvant des douleurs aux épaules.
- Soulève avec les bras à l'intérieur de la veste.
- Est utilisée en combinaison avec l'étrier Confort.

Sangles pour un soulèvement horizontal

Le déplacement des clients dans une position horizontale, par exemple en rapport avec des opérations, des radiographies ou des soins intensifs représente souvent un défi. Cela doit se faire rapidement, en toute simplicité et d'une manière ergonomique pour les soignants et d'une façon confortable et sécurisée pour le client. Nos étriers horizontaux et nos accessoires satisfont à toutes ces exigences. Les stretchers sont fixés à l'ascenseur, en sorte que le client peut être déplacé dans une position horizontale, par exemple de son lit vers le brancard sans soulèvement manuel pour les soignants.



N° d'article	Description de l'article	En combinaison avec	Matériau	Bon équilibre du tronc	Réduction de l'équilibre du tronc	Soutien au niveau du cou et de la tête	Soulèvement depuis le sol	Toilette	Amputation	Sensible à la douleur	Fonction des jambes ou de la position debout réduite	Couché	Bain / Douche	Bande de séjour	Formation à la marche
240368310X	Liftsheet Octo (M ou L)	OctoStretch	Polyester		•	•	•		•	•	•	•	•		
240368340X	Liftsheet Octo (M ou L)	OctoStretch	Plastic coated		•	•	•		•	•	•	•	•		
2403684105	Liftsheet XL Regular 165cm	FlexoStretch	Polyester		•	•	•		•	•	•	•	•		
2403684106	Liftsheet XL Tall 185cm	FlexoStretch	Polyester		•	•	•		•	•	•	•	•		
2403685704	Liftsheet 1900 2-piece	LikoStretch	Coton / Polyester		•	•	•		•	•	•	•	•		
2403685705	Liftsheet 1900	LikoStretch	Coton / Polyester		•	•	•		•	•	•	•	•		
2403687701	RepoSheet Original Regular	étrier à 2 points	Coton / Polyester												
2403687301	RepoSheet Original Regular	étrier à 2 points	Polyester net												
2403687302	RepoSheet Original Ultra	étrier à 2 points	Polyester net												

X : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.



OctoStretch



FlexoStretch



Reposheet



LikoStretch 1900



Sangles pour les clients obèses

L'opital conseille, implémente la politique et propose des solutions de soins pour les clients obèses. Ce groupe cible nécessite une manière spécifique de travailler et des produits adaptés. Étant donné que les moyens que nous proposons sont développés avec des personnes obèses, 'Life without limits' s'adresse également à elles. Nous pouvons proposer des moyens pour soulever les utilisateurs jusqu'à 500 kg.



N° d'article	Description de l'article	Numéro de modèle	Matériau	Dimensions	Bon équilibre du tronc	Réduction de l'équilibre du tronc	Soutien au niveau du cou et de la tête	Soulever du sol	Toilette	Amputation	Sensible à la douleur	Fonction debout réduite	Couché	Bain / Douche	Bande de séjour	Formation à la marche
240350611X	Ultra Tilband	06	Polyester	Short, Regular, Long		•	•	•			•	•				
2403592032X	Ultra Liftpants	920	polyester net	XXL, XXXL	•											•
2403687302	Reposheet Ultra	87	Polyester net HT	Ultra		•	•	•			•	•	•			
240368410X	Liftsheet XL	84	Polyester	Regular, Tall		•	•	•			•	•	•			


x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.

RepoSheet Ultra

Il n'est pas facile de tourner et de changer de position les clients lourds pour éviter les escarres dans de nombreux établissements.

Le RepoSheet convient pour les clients les plus lourds et a une charge maximale de 500 kg.

Il peut également être utilisée avec le système UltraTwin ou par exemple avec un ascenseur mobile Viking.

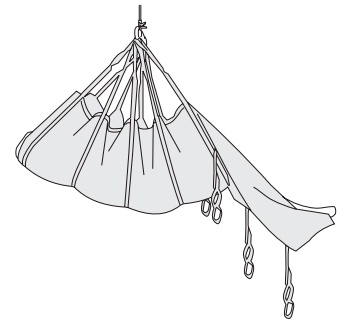

UltraSling

L'UltraSling est notre sangle pour le soulèvement assis / le déplacement des clients les plus lourds. La sangle a des parties séparées pour les jambes reliées à l'étrier.

L'UltraSling a une charge maximale de 500 kg et est utilisée avec le système UltraTwin, dans une installation permanente ou libre dans le FreeSpan.

Formation à la marche avec une sangle au niveau de la ceinture

Le fait que les clients lourds se mettent sur leurs jambes est une étape particulièrement importante dans leur révalidation, par exemple après une opération.

La sangle au niveau de la ceinture Ultra confère un bon soutien pour l'ensemble du corps et encourage le client à faire ses premiers pas. Charge maximale jusqu'à 500 kg.



Sangles jetables

La dissémination des bactéries multirésistantes (MRSA) au niveau des soins de santé et la demande croissante de produits pour une utilisation de courte durée ont donné lieu au développement du Solo, une série d'accessoires de soulèvement jetables. Le caractère unique de la plupart des produits Solo, en comparaison avec nos accessoires de soulèvement ordinaires, est qu'ils sont fabriqués dans un matériau non-tissé particulièrement solide. Les produits Solo n'ont pas pour objet d'être nettoyés, mais ils sont jetés lorsqu'ils sont sales ou lorsque le client n'en a plus besoin. En d'autres termes, ils sont conçus pour une utilisation de courte durée par un client. Les accessoires de soulèvement sont efficaces au niveau de la prévention de la dissémination des infections, mais ont également des avantages économiques et pratiques : il n'est plus nécessaire de les nettoyer, et ils sont toujours immédiatement disponibles dans le service.



N° d'article	Description de l'article	Numéro de modèle	Matériau	Dimensions	Bon équilibre du tronc	Réduction de l'équilibre du tronc	Soutien au niveau du cou et de la tête	Soulever du sol	Toilette	Amputation	Sensible à la douleur	Fonction debout réduite	Couché	Bain / Douche	Bande de séjour	Formation à la marche
240352591X	Sangle Solo HB	250	Non tissé	M, L		•	•	•				•				
24036871003	Solo Reposheet	870	Non tissé	180 x 110 cm		•	•	•				•				
2403683900X	Solo Octo Liftsheet	830	Non tissé	M, L		•	•	•				•				
2503695910X	Solo Multistrap	950	Non tissé	Large												

x : Ici, il faut introduire le nombre, ce qui indique la taille de la sangle.

Tous les modèles sont disponibles de XS à XL. Pour les dimensions pour les obésités spéciales, voir le chapitre « Sangle pour les obésités ».



Sangle Solo HighBack

La Solo HighBack est une sangle qui convient à la plupart des clients. La sangle Solo HighBack peut être utilisée dans toutes les situations de soulèvement, par exemple lors du soulèvement du lit vers la chaise roulante et vers les toilettes.



Solo RepoSheet

La Solo RepoSheet est utilisée pour relever les clients qui ont glissé dans leur lit ou pour changer de position les clients alités, par exemple lors de leur toilette ou pour éviter les escarres.



Drap de soulèvement Solo Octo

Le drap de soulèvement Solo Octo sert à soulever de manière horizontale avec le Liko OctoStretch. L'OctoStretch est facile à utiliser et on y accorde une très grande valeur dans les services de chirurgie et de soins intensifs.




Solo MultiStrap

Les Solo MultiStrap soulèvent et soutiennent les parties du corps du client et facilitent ainsi l'examen, les soins et le traitement. Les Solo MultiStrap peuvent également être utilisées pour tourner un client dans son lit ou pour le soutenir lorsqu'il est sur le côté.

Étriers & accessoires



3156228
LikoScale
Max 400 kg

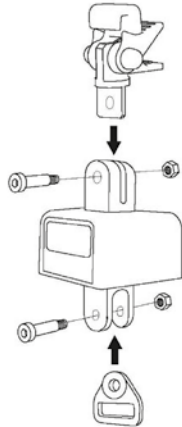

3156232
Adapter set Likoscale
Max 400 kg



3156511
Support Springs Long
Max 70kg



Option : boucles de prolongement



Option : Coussin de protection pour l'étrier

3156513
Support Springs Short
Max 100kg



3156084
Universal SlingBar 350
avec Quick-release Hook™



3156085
Universal SlingBar 450
avec Quick-release Hook™



3156086
Universal SlingBar 600
Avec quick-release hook



3156094
Universal SlingBar 350 R2R™
avec R2R hook™



3156087
Universal TwinBar 670
avec Quick-release Hook™



3156022
Sling Cross-bar 450
avec Quick-release Hook™

Les combinaisons d'accessoires / de produits autres que ceux recommandés par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du client. La charge maximale de l'ensemble est déterminée par l'ascenseur ou l'accessoire, avec la charge maximale la plus faible.

Tous les étriers susmentionnés peuvent être chargés jusqu'à 300 kg.



La sécurité, la fonctionnalité et la fiabilité
constituent nos principales lignes directrices
lors de l'utilisation des sangles et des
accessoires.

Soins, entretien et utilisation des sangles et des accessoires

Afin d'éviter la transmission de maladies contagieuses, il est important de nettoyer la sangle lorsqu'elle est sale ou lorsqu'elle a été utilisée par un autre client. Les sangles de Liko sont composées de différents matériaux, avec différentes propriétés. Les sangles doivent être nettoyées en machine. Les températures pour le nettoyage et le séchage sont mentionnées sur l'étiquette du produit. Le séchage doit se faire le plus rapidement possible après le nettoyage, de préférence dans un séchoir. En ce qui concerne le séchage, il y a quelques produits qui ne peuvent pas aller dans le séchoir et quelques autres produits qui ne peuvent pas être séchés à haute température. Différentes sangles de Liko contiennent des matériaux de renforcement, par exemple : des supports pour les jambes et un soutien pour le dos et la tête. Ce matériau peut être nettoyé à 60-80 °C. Dans le cas d'une température supérieure, le matériau de renforcement peut se déformer et se durcir ; cela signifie moins de confort. En général, la sécurité de la sangle n'est pas affectée. Il est important de suivre les instructions recommandées pour le soin et l'entretien. Si ce n'est pas le cas, la garantie est échue et la durée de vie de la sangle est réduite.

Contrôlez la sangle après le nettoyage.


Tous les points sont contrôlés au niveau de l'usure et des

détériorations : le matériau, les bandes, les ourlets, les boucles, les ceintures. La sangle a une durée de vie limitée et un contrôle très strict est un élément important d'une utilisation sécurisée. Ne pas utiliser de sangle endommagée. On peut avoir recours à un protocole, voir la norme NEN7506, pour une inspection périodique comme ligne directrice pour les éléments qui sont très importants. Les sangles en polyester ont une durée de vie plus longue que les bandes en polyester net. Les poignées de certaines sangles servent à les diriger. S'il y a une charge trop lourde au niveau des poignées, celles-ci peuvent se déchirer. Les produits Solo de Liko sont des produits jetables, destinés à une utilisation individuelle. Les produits Solo ne peuvent pas être nettoyés, mais ils doivent être jetés lorsqu'ils sont sales ou lorsque le client n'en a plus besoin.

Dans les cas où un autre fabricant recommande des accessoires / produits de Liko en combinaison avec ses propres accessoires / produits alors que ces combinaisons ne sont pas approuvées par Liko, ce fabricant est responsable de tous les accessoires / produits de cette combinaison. Dans ces cas, Liko fait référence aux modes d'emploi et aux recommandations du fabricant responsable à propos de l'utilisation, de l'entretien, du nettoyage, du contrôle et de l'inspection de la combinaison pour satisfaire aux exigences de la norme EN ISO 10535.

Instructions de nettoyage

Suivez les instructions de nettoyage sur l'étiquette du produit de la sangle.

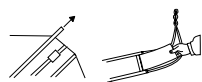

Enlevez les baleines en plastique (si cela s'applique).



Si nécessaire, faites un prélavage à basse température, de 25 à 30 °C. Certaines taches s'enlèveront plus facilement à basse température.



60-80°C
140-176°F

Faites fonctionner la machine à la température indiquée. Utilisez un produit nettoyant.



Mettez dans le séchoir à maximum 50 °C.



Vous ne pouvez pas utiliser de chlore.



Le nettoyage chimique est interdit.



Vous ne pouvez pas repasser.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar

Tél +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk

Tél +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

