

Marina

Ergonomique, durable et élégant dans tout environnement de soins

Hydraulique: 6100 2010 / Électrique: 6100 2060

Marina Deluxe brancard de douche

Le brancard de douche Marina est conçu pour assurer des soins de haute qualité en position allongée. Il aide les aidants à prodiguer des soins efficaces, sûrs et dignes, sans effort physique excessif. Grâce au dossier réglable en continu, à la position anti-Trendelenburg et au réglage en hauteur (électrique ou par vérin à gaz), la posture de travail est optimisée, ce qui contribue à réduire les troubles physiques et à rendre les manipulations plus sereines.

Pour les patients, cela signifie une expérience stable et confortable, où la sécurité et le respect sont essentiels. L'accès des deux côtés offre davantage de flexibilité lors des soins et réduit le temps consacré à chaque patient, contribuant ainsi à un flux de travail efficace.

La finition durable avec revêtement antibactérien aux ions d'argent, le châssis résistant à la corrosion et les surfaces faciles à nettoyer offrent une solution sûre et hygiénique conçue pour durer. De plus, les roulettes robustes avec frein central, ainsi que la compatibilité avec les lève-personnes et les rails de transfert, garantissent une intégration sûre et fluide dans tout environnement de soins.

Lopital Marina – le confort du patient, l'ergonomie au service de l'aidant.

Réglage de longueur intégré standard et accès aux soins des deux côtés. Conçu pour un accès à 360° grâce aux commandes des barrières latérales des deux côtés et adaptable grâce au réglage de longueur intégré.

Conception Plug & Play. Prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, intuitif, nécessitant peu d'entretien et rapide à mettre en œuvre dans tout environnement de soins.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.



Fabriqué à partir de 75 % d'aluminium recyclé



Empreinte CO₂ minimale



Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Convient aux personnes à mobilité fortement réduite à très réduite

Spécifications techniques

Entraînement haut / bas	Hydraulique ou électrique
Réglage du dossier	Vérin à gaz ou électrique
Commande manuelle	Commande manuelle à quatre boutons avec crochet de suspension, IPX6
Boîtier de commande	24VDC, max. 250 W, IPX6
Boîtier de batterie	24V, 2.9 Ah, IPX6
Chargeur	100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A, Chargeur mural

Marina Deluxe

Position anti-Trendelenburg manuelle pour un soutien optimal du patient, avec assistance par vérin à gaz

Barrière latérale sûre et pratique. Rabattable et verrouillable pour une sécurité accrue pendant les soins, tout en permettant un accès facile des deux côtés pour les transferts et les manipulations

Boîtier de commande + boîtier de batterie

Vérin à gaz pour la position anti-Trendelenburg

Matelas Soft Touch. Très confortable, souple et doté d'un revêtement antidérapant.

Tuyau d'évacuation flexible pour une évacuation contrôlée de l'eau de rinçage, adapté à une utilisation quotidienne

Freinage centralisé et roue directionnelle pour un positionnement stable et sécurisé du brancard de douche

Roue pivotante avec fonction de freinage semi-centralisée. Roue pivotante à roulement fluide pour une mobilité sûre et efficace du brancard de douche




70205004
Commande manuelle avec indicateur de batterie



70205003
Boîtier de batterie

En option

70200034 Oreiller (un oreiller est inclus avec les modèles de base).

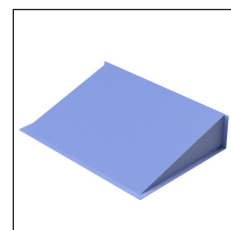

Article n°	Description de l'article	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Haut / bas	Charge max.	Poids du produit en kg
6100 2000	Marina Basic hydraulique brancard de douche	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70 – 80	45 – 95	227	76
6100 2010	Marina Deluxe hydraulique brancard de douche	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70 – 80	45 – 95	227	80
6100 2050	Marina Basic électrique brancard de douche	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70-80	45 – 95	227	76
6100 2060	Marina Deluxe électrique brancard de douche	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70-80	45 – 95	227	80

*Toutes les dimensions de ce tableau sont indiquées en centimètres.

Hydraulique: 6100 2000 / Électrique: 6100 2050

Marina Basic brancard de douche

Le Marina Basic est un brancard de douche fonctionnel et facile à utiliser pour les soins en position allongée.

Contrairement au Marina Deluxe, ce modèle de base ne dispose pas de dossier. Il est équipé de quatre roues pivotantes avec freins individuels, ce qui facilite son utilisation et son entretien. Le Marina Basic est disponible avec un réglage hydraulique ou électrique de la hauteur et est doté de barrières latérales rabattables pour des soins sûrs et confortables. Une solution idéale pour les établissements de santé à la recherche de fonctionnalité, de fiabilité et de facilité d'utilisation.



Pédale de commande hydraulique.



Roue pivotante avec frein individuel.



Empreinte CO₂ minimale



Fabriqué à partir de 75 % d'aluminium recyclé



Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Article n°	Description de l'article	Longueur intérieure	Largeur intérieure
6720 0005	Matelas Basic 186 cm	170	70
6720 0015	Matelas Basic 206 cm	190	70
6720 0010	Matelas Deluxe 186 cm	170	70
6720 0020	Matelas Deluxe 206 cm	190	70
6720 0030	Matelas Deluxe 226 cm	170	70



Convient aux personnes à mobilité fortement réduite à très réduite

Ignifuge (norme M2)

Conforme aux normes de sécurité incendie M2 pour une protection accrue dans les environnements de soins professionnels.

Antibactérien.

Le matelas est antibactérien grâce à l'ajout d'ions d'argent.

Matelas Soft Touch.

Particulièrement confortable et doux au toucher, il est doté d'un revêtement antidérapant pour une sécurité accrue.

Haute résistance aux rayures.

La surface durable résiste à l'usure et conserve une apparence propre et professionnelle au fil du temps.

Conforme à la réglementation REACH et

sans cadmium. Fabriqué conformément aux exigences de la réglementation REACH et exempt de cadmium, pour une utilisation plus sûre et respectueuse de l'environnement.

Matelas sûr et respectueux de la peau.

Exempt de substances nocives telles que les phtalates, il est idéal pour les peaux sensibles et convient à une utilisation quotidienne en toute sécurité.

Matelas multicouche durable.

Composé de quatre couches de PVC pour un confort accru, un soutien durable et une excellente résistance à l'eau et à l'usure.

