

LUNA® X5

Conçu pour offrir une flexibilité et une disponibilité à long terme.

301503050
LUNA® X5

Le LUNA® X5 s'adapte facilement à tous les environnements de soins. Sa conception intelligente tout-en-un – fixe, mobile et adaptée à plusieurs capacités de levage – garantit une flexibilité maximale et une longue durée de vie. Son fonctionnement intuitif le rend simple et efficace à utiliser. Grâce à sa construction durable et à ses rails en aluminium recyclé, le LUNA® X5 offre un faible impact environnemental et un coût total de possession avantageux.

Flexibilité tout-en-un. Le LUNA® X5 passe aisément du mode portable au mode fixe et supporte 150, 200 ou 275 kg, sans équipement supplémentaire pour s'adapter à l'évolution des besoins en soins.

Ergonomie et sécurité de premier ordre. Avec un poids de seulement 5,2 kg, il s'agit du monte-charge le plus léger du marché, ce qui réduit le risque de surcharge des muscles et des articulations. Il est équipé d'une commande manuelle intuitive avec arrêt d'urgence et fonction de descente d'urgence.

Hauteur de système très basse. Avec une hauteur de système de seulement 405 mm, le LUNA® X5 s'adapte même aux pièces dont les plafonds ne dépassent pas 2200 mm, ce qui le rend idéal pour les soins à domicile et les établissements pour personnes âgées.

Peu d'entretien, beaucoup de disponibilité. La conception intelligente et conviviale permet d'effectuer rapidement toutes les tâches de maintenance standard, ce qui, combiné à l'absence de pièces remplaçables à titre préventif, se traduit par le coût de maintenance le plus bas.

Durabilité intégrée. Fabriqué à partir de plus de 75% d'aluminium recyclé, le LUNA® X5 réduit l'empreinte carbone de 66 % et est entièrement recyclable, contribuant ainsi à des environnements de soins plus écologiques.



LUNA® X5

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Capacité de levage maximale | 150 kg / 200 / 275 kg (configurable) |
| Pesée du système | Seulement 5,2 kg (sans barre d'écartement) - le plus léger de sa catégorie |
| Plage de levage | 2500 mm |
| Hauteur du système | 405 mm – permet l'installation dans des pièces à plafond bas (jusqu'à 2200 mm) |
| Dimensions | Ø 320 mm x H 130 mm |
| Niveau sonore | 49 dB (sans charge) / 53 dB (avec une charge de 175 kg) |
| Durée de vie prévue | 20 ans ou 30,000 levées / garantie de 5 ans |
| Chargement | Chargement sur le rail, chargement mural ou station de chargement portable |
| Batterie | 36 V NiMH, environ 85 levées avec une batterie pleine (charge de 90 kg) |



Panneau frontal avec touches de fonction et connexion de la commande manuelle

Douille à baïonnette

Barre d'écartement


Contrôle des mains.
IPx7-rated, intuitive layout with emergency stop, battery and service indicators



Un chariot pour : le moteur mobile, le moteur fixe et le chargement en piste




Rails muraux

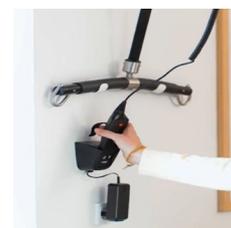

Recharge via la commande manuelle

Mesures identiques pour le mode fixe et le mode portable

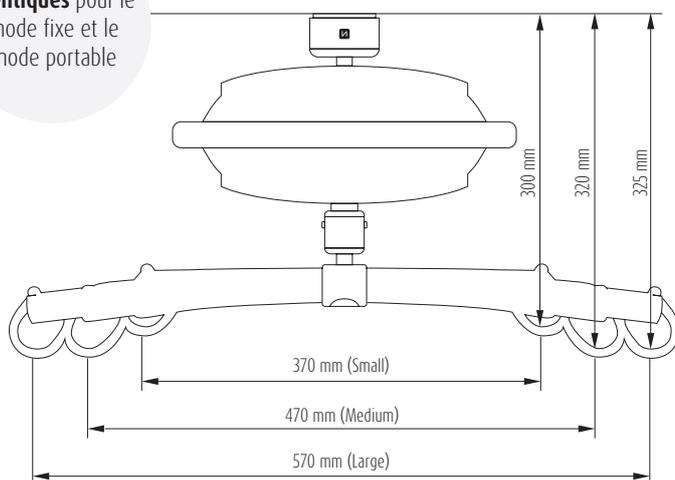

Si le système de rails est équipé de la technologie ITC (In-Track Charging), la recharge s'effectue automatiquement.

L'entretien facilité

- Aucun outil spécial n'est nécessaire - toutes les opérations d'entretien courant s'effectuent facilement et rapidement.
- En cas de dysfonctionnement de la commande manuelle, il est possible, selon la cause, de remplacer séparément le câble, le crochet ou la commande manuelle elle-même.
- L'indicateur de service intelligent change de couleur tous les 12/13 mois pour les contrôles préventifs.
- Composants durables, de haute qualité et réparables pour une fiabilité et un faible coût total de possession (TCO).

Souhaitez-vous obtenir plus d'informations ou une démonstration ? Veuillez contacter Lopital.



Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13.52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Lopital België B.V.
Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3.870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be