

Line+

Grande portée et capacité élevée pour des déplacements confortables

35004502

Line+ lève-personne à colonne

Le Line+ offre une portée étendue et une capacité de levage renforcée, apportant davantage d'espace et de flexibilité lors des transferts. Son bras allongé permet un positionnement optimal, tandis que le mouvement de levage entièrement vertical assure des transitions précises et confortables entre les positions assise et allongée. Le lève-personne à colonne avec cintre électrique 4 points facilite un repositionnement fluide, pour des mouvements naturels et parfaitement maîtrisés tout au long du transfert.

Conçu pour une utilisation intuitive, le Line+ peut être positionné exactement là où il est nécessaire grâce à son piétement électrique réglable et à ses fonctions de levage motorisées. Les pieds peuvent être ouverts ou fermés pour faciliter l'accès autour des lits et des fauteuils, tandis que le bras de levage et le cintre se commandent facilement via la télécommande pour des ajustements précis. Associé à l'assistance à la conduite esense, le lève-personne se déplace sans effort dans toutes les directions, réduisant la charge physique et garantissant des manœuvres sûres et efficaces pour les soignants. Conçu pour le confort du patient comme pour le bien-être des soignants, le Line+ réunit efficacité, sécurité et simplicité d'utilisation dans une solution fiable et performante.

Portée Étendue et Confort Optimal.

Le bras allongé offre davantage d'espace et de flexibilité lors des transferts, assurant un positionnement confortable pour le patient comme pour le soignant.

Ergonomie et Sécurité au Travail.

Conçu pour réduire la charge physique et aider les soignants à travailler de manière saine et durable.

Maniabilité sans Effort. L'assistance à la conduite intuitive avec capteurs de force permet des déplacements fluides et contrôlés dans toutes les directions, avec un minimum d'effort.

Performance Haute Capacité. Grâce à sa capacité de levage renforcée, le Line+ est idéal pour les situations de soins plus exigeantes, sans compromis sur la simplicité d'utilisation.


Spécifications techniques

Charge max.	175 kg
Poids du produit	65 kg
Longueur	190 cm
Largeur	74 cm
Height (adjustable)	50 à 100 cm



Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite



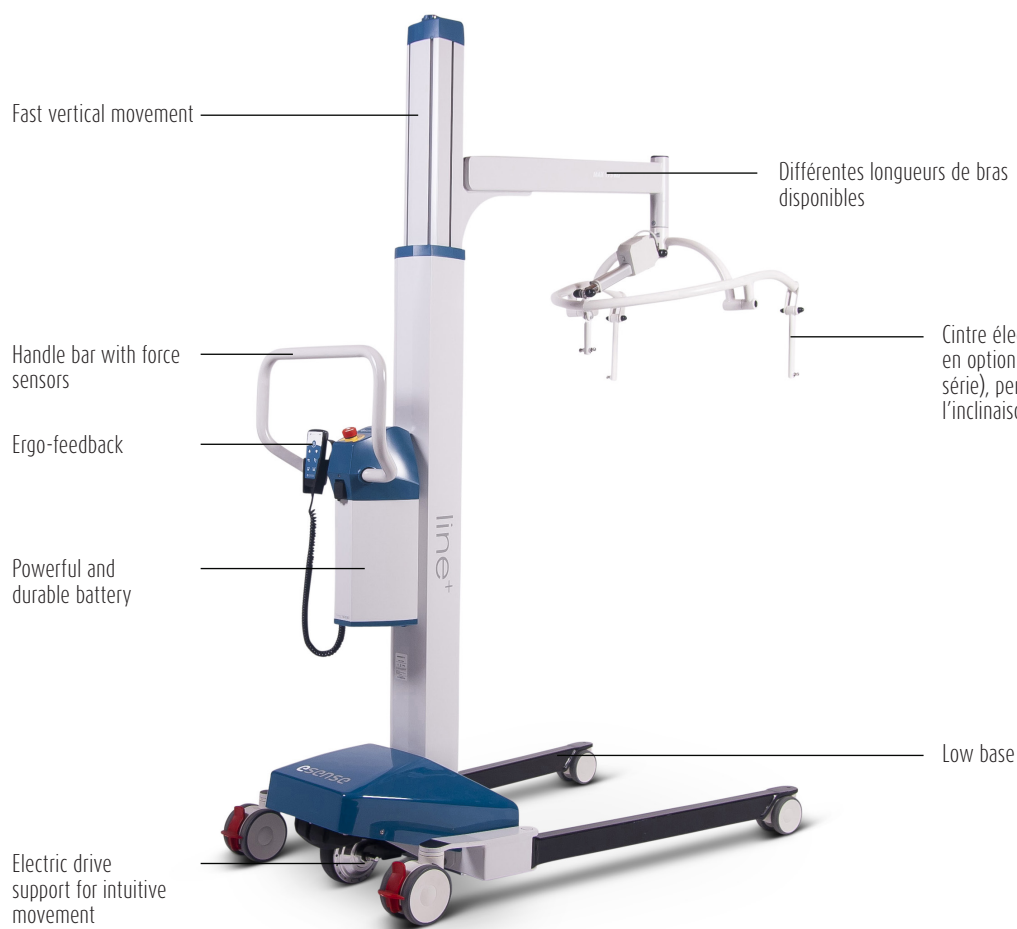

Opération manuelle avec LED : niveau de batterie, entretien et indicateurs marche/arrêt.

Spécifications techniques

Longueur du châssis	120 cm
Hauteur du châssis	11.5 cm
Largeur extérieure max. – pieds fermés	78 cm
Largeur intérieure max. – pieds ouverts	127 cm
Largeur intérieure min.	46 cm
Plage de levage verticale (élévation)	130 cm
Portée horizontale (bras)	72 cm
Diamètre de tournage	146 cm
Garde au sol min.	3.7 cm

Vous souhaitez plus d'informations ou une démonstration ? Contactez Lopital.



Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Lopital België B.V.
Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3 870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.