

Lopital éveille vos sens...



Confort et bien-être

Voilà ce que vous offrez aux résidents et aux patients avec les baignoires thérapeutiques de Lopital. La musique, le parfum, la chaleur, le massage à bulles et la couleur pendant le bain diminuent les troubles physiques et psychiques et favorisent le bien-être total. En outre, les baignoires sont faciles à l'emploi pour vos assistants. Une soignante et une thérapeute savent de quoi elles parlent ...



Jeanine de Kort, thérapeute

“Bien sûr que j’y crois. Je travaille souvent avec des patients avec des troubles dépressifs et autistiques. Pour ces patients, ces bains leur font le plus grand bien. Un vrai moment de bien-être. Chaque jour, je vois ce qui peut être atteint avec l’aromathérapie (huiles

essentielles dans le bain pour vivre la sensation des parfums), la chromothérapie (lumière et couleur), la musicothérapie et la balnéothérapie (massage dans bain chaud). Ces thérapies soulagent vraiment les plaintes comme, par exemple, l’insomnie, les douleurs, l’inconfort des rhumatismes et les problèmes de circulation du sang. Chaque thérapie est adaptée aux plaintes spécifiques de l’individu”.

Liesbet van Gaal, soignante

“Au début j’étais sceptique, je l’avoue. Qu’est-ce que cela signifie pour mon travail ? Mais j’ai bien vite changé d’avis. Les baignoires sont faciles à l’emploi, réglables en hauteur et la Batéia a même une porte coulissante. Très pratique. Mais ce sont les patients qui me donnent le plus de satisfaction. Ils profitent intensément de ces bains thérapeutiques. Par contre, le problème est qu’ils ne veulent plus en sortir”.



Vivez la sensation du bain Batéia

Faites profiter vos patients de la Batéia à la chromothérapie (thérapie par la lumière/la couleur). La lumière est composée de différentes couleurs qui influent sur les courants d'énergie du corps humain. La lumière peut stimuler ou apaiser.

La baignoire Batéia offre tous les avantages ergonomiques, la facilité d'emploi et le confort au patient et au soignant. Grâce à la porte coulissante les patients peuvent aisément entrer et sortir du bain. La baignoire Batéia est réglable en hauteur. L'emploi est d'une simplicité enfantine. La meilleure qualité en toute simplicité.

Hygiène

La qualité des matériaux de la baignoire Batéia et son accessibilité rendent son entretien aisé.

Options de la baignoire Batéia

- Porte automatisée.
- Siège ergonomique.
- Dossier ergonomique avec appui-tête intégré.
- Robinetterie thermostatique intégrée avec douchette à main.
- Électrique réglable en hauteur en continu.



Sérigraphie



Un bain de lumière





Le parfum
du bien-être

Harmonia: une baignoire extra longue pour un confort extra large

L'aromathérapie est une méthode pour combattre le stress. Des odeurs spéciales stimulent les défenses naturelles de l'organisme et peuvent ainsi prévenir des infections virales.

Avec la baignoire Harmonia, par exemple, vous profiterez des bienfaits de l'aromathérapie.

Grande, plus grande, la plus grande. La baignoire Harmonia, dans un format XL, permet au patient une immersion totale. La baignoire est pourvue d'un système de commandes simple et elle est réglable en hauteur. Elle a été conçue pour soulager les assistants, les patients et les résidents et pour faciliter au maximum les manipulations de l'aidant.

Entretien

L'entretien de la baignoire Harmonia est également aisé grâce aux matériaux et à l'ergonomie.

Le patient avant tout

Tout comme la Batéa et la Lanira, l'Harmonia peut être pourvue d'un système de conduites d'eau (balnéothérapie) qui font peu de bruit. Le calme et la sérénité du patient doivent être assurés.



L'aromathérapie éveille vos sens

Thérapies du bien-être

Découvrez les différentes thérapies des baignoires

Aromathérapie

L'aromathérapie est l'utilisation d'arômes d'essences végétales médicinales. Les huiles essentielles sont extraites de plantes aromatiques par distillation à la vapeur d'eau. Le corps humain se régularise de façon autonome : il reprend des forces, se remet et guérit. L'aromathérapie a pour objet de renforcer et de stimuler ces processus et vise la prévention de la maladie. Chaque arôme a ses spécificités. Certains arômes agissent efficacement sur le stress, alors que d'autres arômes ont un effet positif sur le système nerveux central. Ils peuvent être sédatifs ou, au contraire, stimulants. L'aromathérapie est souvent utilisée pour rétablir un équilibre perturbé.

Balnéothérapie

Stimulation par hydro-massage pour une relaxation totale. Le principe de la balnéothérapie à air (air blower) consiste en l'envoi de milliers de bulles d'air chaudes propulsées par un compresseur par des buses (airjets) réparties dans le fond du bain. L'effleurement de ces bulles sur le corps assure un massage qui donne l'effet de volupté, d'apaisement et de relaxation tant convoité.

Le principe de l'eau (whirlpool) consiste, lui, en l'envoi de jets d'eau, via de l'air comprimé, par des buses (hydrojets) placées de façon spécifique (pieds et cuisses). C'est par l'adjonction d'air dans les conduites de la balnéothérapie que l'on fait augmenter la puissance du jet à la sortie (système Venturi). Les zones du corps qui vont être ciblées se verront soumises à un véritable massage apaisant les zones de douleur, stimulant l'organisme et effectuant un drainage lymphatique.

Les bienfaits de la balnéothérapie et de l'hydro-massage :

- Soulager la pathologie rhumatismale, l'arthrose, les lombagos, les sciatiques et la névralgie pendant la grossesse.
- Combattre efficacement les suites d'un traumatisme.
- Soulager les fractures, les entorses et les interventions chirurgicales qui ont laissé des raideurs tendineuses ou de
- Diminuer les plaintes: jambes lourdes, crampes nocturnes, varices, grosses jambes, cellulite et oedèmes.
- Aider à un mieux-être gynécologique.
- Soutenir et améliorer l'équilibre comportemental des personnes atteintes de troubles psychiques.

Chromothérapie

Issue des médecines traditionnelles de l'Inde, de la Chine et de la Grèce, la chromothérapie utilise les couleurs dans le but de guérir le corps et d'éveiller l'esprit. La théorie corpusculaire de la lumière d' Isaac Newton stipulera que la lumière se divise en sept couleurs distinctes, à l'aide d'un prisme. Ces couleurs ont chacune une vibration différente, mieux connue sous le nom de longueur d'ondes. La chromothérapie utilise ces vibrations pour mobiliser de façon sélective les énergies des corps vivants et influencer les courants énergétiques du corps humain.

Chacune des couleurs du spectre lumineux a ses propriétés, tant au plan physique que mental. Nous pouvons les diviser en deux gammes. Ainsi les couleurs chaudes ont un champ de résonance plus long et les couleurs plus froides, une longueur d'ondes plus courte. Tout selon les besoins du patient:

stimuler ou apaiser. La chromothérapie est simple, naturelle, efficace et rapide.

Deux exemples

Jaune : la couleur jaune combat les maladies glandulaires, les maladies du système lymphatique et renforce le système nerveux. Le jaune a un effet positif sur les troubles osseux chroniques et elle renforce la vitalité. Au point de vue psychique, elle stimule la concentration.

Bleu : la couleur bleue a un profond effet sur la relaxation du corps et de l'esprit. Elle soulage les migraines et maux de tête, les douleurs d'estomac, les crampes et les maladies du foie. Au point de vue psychique, elle aide à "ouvrir" le mental et à combattre l'égoïsme.

Musicothérapie

La musicothérapie utilise le son et la musique comme outil thérapeutique. Elle aide à maintenir ou à améliorer la santé mentale, physique ou émotionnelle. Elle a un effet direct sur le système nerveux central. Les applications thérapeutiques de la musicothérapie sont très nombreuses. Quelques effets positifs de la musicothérapie :

- Amélioration de l'humeur.
- Réduction de l'anxiété.
- Améliore la qualité de vie des personnes déséquilibrées mentalement (autistes, schizophrènes, déments).
- Améliore les soins néonataux.
- Contribue à la diminution de l'utilisation de morphine, d'analgésiques et autres sédatifs.



Faites étinceler
votre peau



Le confort de Lanira

La musique adoucit l'âme. La musique aide à se détendre et peut diminuer le stress. La musicothérapie peut aider les personnes à sortir de leur isolement. En écoutant de la musique pendant un bain relaxant, les patients peuvent avoir moins de douleurs, leur anxiété diminue et leur humeur s'améliore.

La baignoire Lanira offre le meilleur des deux mondes. Elle allie design et ergonomie. Cette baignoire splendide, aux dimensions généreuses et aux fonctions multiples, soulage réellement le travail de vos assistants. La qualité de ses matériaux et son accessibilité rendent son entretien aisé.

Options

- Robinetterie intégrée avec douchette à main.
- Carénage complet avec sérigraphie, disponible en divers modèles.

Profiter pleinement

Pour les patients, la baignoire Lanira est une fête pour tous les sens. La baignoire possède des dimensions généreuses et elle est très facile d'accès. Elle propose aux patients toute une gamme de possibilités thérapeutiques comme, par exemple, le projet "snoezelen". Profiter pleinement. Ils le méritent bien, eux aussi.



Massage relaxant qui éveille vos sens

A high-speed photograph of water splashing, with a large, clear splash at the top and numerous smaller bubbles and droplets falling and rising in the water below. The water has a vibrant blue-green hue. The background is a soft, out-of-focus white and light blue.

Faites étinceler votre peau

Les massages à l'eau chaude ont un effet très positif sur beaucoup de patients. Ils soulagent les douleurs musculaires et les inflammations; la raideur matinale disparaît. Mais la balnéothérapie aide aussi à un mieux-être gynécologique (troubles du cycle mensuel), soulage les varices, les jambes lourdes et les crampes nocturnes. L'eau étant directement prélevée dans la baignoire, il n'y a donc pas d'apport d'eau supplémentaire.

Spécifications

Batéia

Dimensions et poids

Largeur extérieure	765 mm
Largeur intérieure	410/590 mm
Longueur extérieure	1700 mm
Longueur intérieure	1030/1450 mm
Hauteur min. porte fermée	870 mm
Hauteur max. porte fermée	1170 mm
Hauteur min. porte ouverte	530 mm
Hauteur max. porte ouverte	870 mm
Poids max. de l'utilisateur	210 kg
Poids max. de l'utilisateur et de l'eau	300 kg
Poids min. de la baignoire	210 kg
Poids max. de la baignoire (toutes options)	235 kg
Durée session balnéothérapie	+/- 20 min



Eau

Consommation max.	178 L
Durée de remplissage pression 3.0 bars	+/- 9 min
Vidage baignoire pleine	+/- 3 min 20 sec
Affichage numérique de la température	0° à 55° C
Précision de l'affichage de la température	1° C

Harmonia

Dimensions et poids

Largeur extérieure	840 mm
Largeur intérieure	560/680 mm
Longueur extérieure	2300 mm
Longueur intérieure	1920 mm
Hauteur min. porte fermée	700 mm
Hauteur max. porte fermée	1000 mm
Poids max. de l'utilisateur	210 kg
Poids max. de l'utilisateur et de l'eau	500 kg
Poids min. de la baignoire	176 kg
Poids max. de la baignoire (toutes options)	201 kg
Durée session balnéothérapie	+/- 20 min

Eau

Consommation système pré-remplissage	+/- 200 L
Consommation max.	+/- 400 L
Durée de remplissage pression 3.0 bars	+/- 12 min
Durée de remplissage système pré-remplissage	10 min
Vidage système pré-remplissage	+/- 3 min 20 sec
Vidage baignoire pleine	+/- 6 min 45 sec
Affichage numérique de la température	0° à 55° C
Précision de l'affichage de la température	1° C



Lanira



Dimensions et poids

Largeur extérieure	900 mm
Largeur intérieure	510/620 mm
Longueur extérieure	1900 mm
Longueur intérieure	1250/1680 mm
Hauteur min. de la baignoire	747 mm
Hauteur max. de la baignoire	1047 mm
Poids max. de l'utilisateur	210 kg
Poids max. de l'utilisateur et de l'eau	500 kg
Durée d'une session balnéothérapie	+/- 20 min

Eau

Consommation système pré-remplissage	+/- 200 L
Consommation max.	297 L
Durée de remplissage pression 3.0 bars	+/- 15 min
Durée de remplissage système pré-remplissage	10 min
Vidage système pré-remplissage	+/- 3 min 20 sec
Vidage baignoire pleine	+/- 5 min
Affichage numérique de la température	0° à 55° C
Précision de l'affichage de la température	1° C



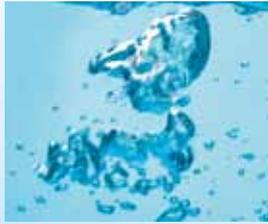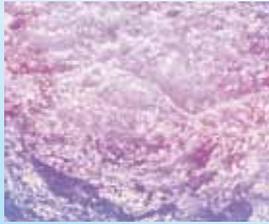



www.lopital.be



Pour plus d'informations, visitez notre site web: www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Pour plus d'informations, visitez notre site web: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 03/870.51.60, Fax +32 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

