



Creating balance in healthcare



## Viking M, L, XL Lève-personne



# Viking M, L, XL



Convient pour des personnes présentant un handicap moyen à très grave

## Viking M, L et XL

Le lève-personne Viking est disponible en cinq modèles, du super robuste XL au petit modèle M. Tous les modèles se distinguent par une grande souplesse d'utilisation et une grande capacité de levage. Le lève-personne Viking est en aluminium, ce qui le rend plus léger.

Combiné avec le grand assortiment d'accessoires Liko, le lève-personne Viking permet de résoudre divers problèmes de levage. Les harnais et accessoires Liko sont disponibles en diverses variantes, pour les charges légères comme pour les utilisations plus lourdes, jusqu'à 300 kg.

	Viking M	Viking L	Viking XL
<b>Charge maximale</b>	205 kg	250 kg	300 kg
<b>Hauteur de levage maximum</b>	181 cm	179 cm	182 cm
<b>Hauteur de levage minimum</b>	46 cm	45 cm	49 cm
<b>Hauteur d'intervalle</b>	125 cm	134 cm	133 cm
<b>Hauteur maximum</b>	198 cm	200 cm	208 cm
<b>Longueur</b>	133 cm	135 cm	135 cm
<b>Largeur</b>	63 - 104 cm	66 - 96 cm	75 - 116 cm
<b>Poids (avec batteries)</b>	30 kg	40 kg	43 kg

## Aluminium, le métal écologique

La ligne de lève-personnes Viking est fabriquée en aluminium et ce n'est pas un hasard. La production d'aluminium demande beaucoup d'énergie, mais une fois façonné, ce métal ne rouille pas. Grâce à la légèreté du matériau, le lève-personne roule en souplesse et est facile à manipuler. Ainsi, le dos et les épaules du personnel soignant sont moins sollicités. L'aluminium

présente aussi un avantage écologique puisque son recyclage est pratiquement illimité et demande peu d'énergie. Soulever un patient exige un matériel technique adapté, mais aussi une connaissance des complications médicales. Soulever et déplacer les personnes à mobilité réduite est la spécialité de Liko.



Viking M



Viking L



Viking XL

2102040015

# Viking M Lève-personne

2102040015

## Viking M Lève-personne

Le Viking M est le modèle le plus utilisé. Ce lève-personne mobile est optimal et parfaitement équipé. Il s'utilise dans les situations de levage les plus courantes. Le Viking M est très léger mais peut néanmoins soulever des charges jusqu'à 205 kg.

- Fabriqué en aluminium: esthétique, durable et écologique.
- Poids du lève-personne: 35 kg, extrêmement maniable.
- Peut s'utiliser dans des toilettes exigües.
- Capacité de levage: 205 kg.
- Le lève-personne polyvalent idéal pour des situations de levage exigeantes et diverses.
- Avec accoudoirs.
- S'utilise parfaitement pour la rééducation à la marche.





Charge maximale 205 kg

2102040015

# Viking M Lève-personne

## pécifications techniques

- Vitesse de levage 3,5 cm/s sans charge
- Capacité de l'accu 2 batteries rechargeables 12 V, 2,9 Ah, appelées batteries gel. Batteries de rechange disponibles chez le fabricant.
- Chargeur intégré 100-230V, max. 400mA
- Moteur du mât 24 V 6 A, moteur magnétique permanent avec système de sécurité mécanique composé d'une traction et d'un écrou de sécurité.
- Moteur de la base 24 V 3,5 A, moteur mécanique permanent.
- Matériau Aluminium
- Commande manuelle Mécanique et électrique d'urgence
- Roues Avant: roue à double gallet 7,5 cm Ø. Arrière: 10 cm Ø roue avec frein
- Utilisation Int. 10/90, utilisation active max. 2 min. Sur une durée de 100, l'utilisation active peut atteindre 10, mais avec un maximum de 2 min.
- Poids produit 35 kg
- Charge max. 205 kg

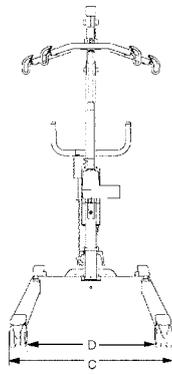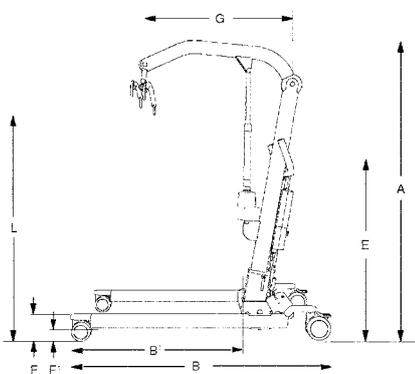

Article n°	Description	Charge maximale	Longueur		Dimensions		B	B'	C	D	E	F	F'	G	Poids		Diamètre de rotation
			Max.	Min.	A' max.	A' min.									Total	Élément	
2102040015	Viking M	205	181	46	198	134	133	87	63-104	52-93	106/101/96	11	4	90	35	18	140

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm.

\* Diamètre standard 14 cm. Le diamètre des roues de 7,5 cm à l'avant est de 11,5 cm.



2102040004

# Viking L Lève-personne

2102040004

## Viking L Lève-personne

Le Viking L offre une excellente capacité de levage pour son gabarit. Ce lève-personne est particulièrement pratique, il s'utilise pour les besoins de levage les plus courants et pour la plupart des clients lourds.

- Fabriqué en aluminium: esthétique, durable et écologique.
- Poids du lève-personne: 40 kg, léger et facile à utiliser.
- Capacité de levage: 250 kg.

- Pour les situations de levage difficiles, même depuis le sol.
- Peut être équipé d'accoudoirs.
- L'assortiment propose des accessoires spécialement conçus pour la rééducation à la marche.
- Roues à grand diamètre, très maniables.

Le Liko Original à dos rehaussé combiné à l'étrier Universel 670 Twin, qui donne plus d'espace aux épaules et à l'abdomen, permettent de soulever le patient depuis le sol.

Charge maximale 250 kg





2102040004

# Viking L Lève-personne

## Technische specificaties

- Vitesse de levage 3,5 cm/s sans charge
- Capacité de l'accu 2 batteries rechargeables 12 V, 2,9 Ah, appelées batteries gel. Batteries de rechange disponibles chez le fabricant.
- Chargeur intégré 100-230 V, max. 400 mA.
- Moteur du mât 24 V 6 A, moteur magnétique permanent avec système de sécurité mécanique composé d'une traction et d'un écrou de sécurité.
- Moteur de la base 24V 3,5A, moteur mécanique permanent.
- Matériau Aluminium
- Commande manuelle Mécanique et électrique d'urgence
- Roues Avant: roue à double gallet 10 cm Ø. Alternative: double gallet 7,5 cm Ø. Arrière: roue à double gallet 12,5 cm Ø avec frein. Alternative: 100 mm Ø roue avec frein.
- Utilisation intermittente Int. 10/90, utilisation active max. 2 min. Sur une durée de 100, l'utilisation active peut atteindre 10, mais avec un maximum de 2 min.
- Poids total 40 kg
- Charge maximale 250 kg

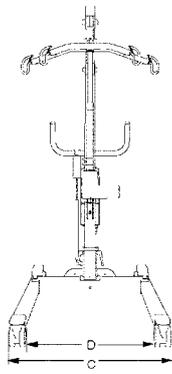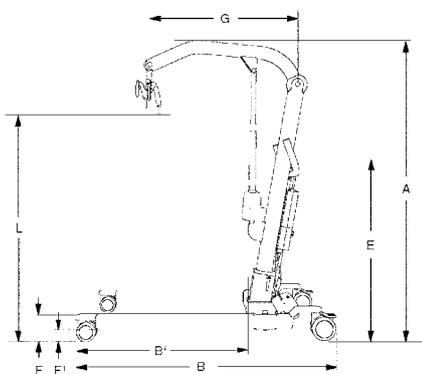

Article n°	Description	Charge maximale	Longueur		Dimensions		B	B <sup>1</sup>	C	D	E	F*	F <sup>1</sup>	G	Poids		Diamètre de rotation
			Max.	Min.	A* max.	A* min.									Total	Élément	
2102040004	Viking L	250	179	45	200	136	135	90	66-96	55-95	106	14/11,5	4,5	90	40	22	142

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm..

\* Diamètre standard 14 cm. Le diamètre des roues de 7,5 cm à l'avant est de 11,5 cm.



Standard: Roues à grand diamètre, très maniables.

2102040013

# Viking XL Lève-personne

2102040013

## Viking XL Lève-personne

Le Viking XL est principalement conçu pour les clients lourds, mais s'utilise aussi parfaitement pour les déplacements de charges légères.

- Fabriqué en aluminium : esthétique, durable et écologique.
- Poids du lève-personne : 43 kg, léger et facile à utiliser.
- Capacité de levage : 300 kg.

- Pour les situations de levage difficiles, même depuis le sol.
- Avec accoudoirs et culotte de levage Liko, le Viking est idéal pour la rééducation à la marche.
- Avec un harnais Flexo et un stabilisateur, même les clients les plus lourds peuvent être soulevés horizontalement.





2102040013

# Viking XL Lève-personne

## Technische specificaties

- Vitesse de levage 3,5 cm/s sans charge
- Capacité de l'accu 2 batteries rechargeables 12 V, 2,9 Ah, appelées batteries gel. Batteries de recharge disponibles chez le fabricant.
- Chargeur intégré 100-230 V, max. 400 mA
- Moteur du mât 24 V 6 A, moteur magnétique permanent avec système de sécurité mécanique composé d'une traction et d'un écrou de sécurité.
- Moteur de la base 24V 3,5A, moteur mécanique permanent.
- Matériau Aluminium
- Commande manuelle d'urgence Mécanique et électrique
- Roues Avant: roue à double gallet 10 cm Ø. Alternative: roue à double gallet 7,5 cm Ø. Arrière: roue à double gallet 12,5 mm Ø avec frein. Alternative: 10 cm Ø roue avec frein
- Utilisation Int. 10/90, utilisation active max. 2 min. Sur une durée de 100, l'utilisation active peut atteindre 10, mais avec un maximum de 2 min.
- Poids total 43 kg
- Charge maximale 300 kg

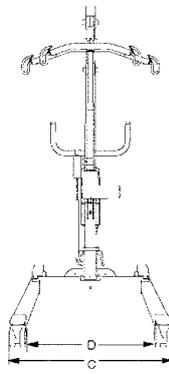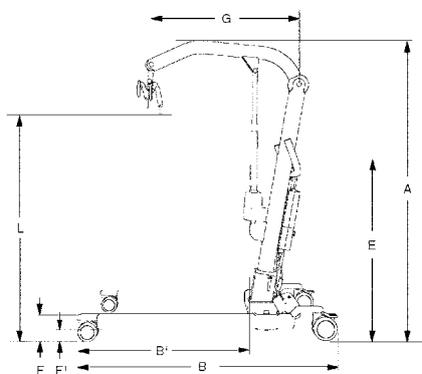

Article n°	Description	Charge maximale	Longueur		Dimen-sions		B	B'	C	D	E	F	F'	G	Poids		Diamètre de rotation
			Max.	Min.	A' max.	A' min.									Total	Élémt	
2102040013	Viking XL	300	182	49	208	152	135	96	75-116	63-103	105	14/11,5	4,5	90	43	21	152

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm.

\* Diamètre standard 14 cm. Le diamètre des roues de 7,5 cm à l'avant est de 11,5 cm.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : [www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

Lopital België SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

