

Reflex

Inclinaison confortable, fiabilité durable

5100 5600

Reflex 5600 chaise de douche-toilette avec repose-pieds réglable en hauteur

Cette chaise de douche-toilette électrique, réglable en hauteur, est conçue pour assurer des soins sûrs et dignes, tout en offrant un confort maximal à l'utilisateur comme à l'aidant. Son siège intégré reproduit le maintien et le confort d'une chaise classique, tout en offrant des fonctionnalités essentielles telles que le réglage électrique de la hauteur et une inclinaison allant jusqu'à 30°. Elle est ainsi idéale pour la toilette et les soins dans différents environnements de prise en charge. Sa conception multifonctionnelle permet d'assurer les soins d'hygiène personnelle de manière ergonomique et efficace.

Pour plus de polyvalence, la chaise est équipée de repose-pieds amovibles et rabattables avec protection des mollets, facilitant les transferts et améliorant le soutien des jambes. Ses accoudoirs rabattables facilitent les déplacements latéraux, tandis que le châssis robuste assure un positionnement sûr et stable au-dessus des toilettes ou lors de l'utilisation d'un bassin ou d'un seau. Le fonctionnement électrique fluide et les commandes intuitives en font une solution pratique pour les aidants, tout en offrant aux utilisateurs à mobilité réduite une assise confortable et sécurisée.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Spécifications techniques

Charge max.	135 kg
Poids du produit	53 kg
Largeur du siège	47 cm
Profondeur du siège	44 cm
Hauteur du siège (réglable)	50 à 100 cm



Convient aux personnes
à mobilité modérément
réduite à fortement réduite

5100 5600

Reflex 5600 chaise de douche-toilette

Appui-tête complet
réglable en hauteur
et en profondeur

Poignée ergonomique
pour une utilisation fluide
et légère

Confort d'assise ergonomique

Rails de guidage
pour bassin ou seau
hygiénique

Châssis robuste
et stable pour
une sécurité et un
soutien maximaux

Accoudoirs avec fer-
meture à l'avant pour
plus de sécurité

Repose-pieds amovibles et
réglables en hauteur, avec
protection des mollets

Pare-chocs pour éviter
d'endommager le châssis

Point de recharge avec
raccord magnétique,
sans batterie séparée
nécessaire.


Panneau de commande.

En option

7057 0508
Roue 125 Fixation
de la direction.



6840 5661
Accoudoir fermeture
avant avec à double
verrouillage.

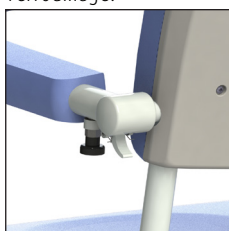

6950 5624
Dossier Platilon.



Options

- 7056 5001 Accoudoir droit
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique
- 6975 8045 Ceinture de sécurité 4 points
- 6950 5624 Dossier Platilon
- 6950 5625 Siège Platilon Modèle en U
- 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction

Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	106 cm
Largeur totale du châssis de base	70 cm
Rayon de braquage	120 cm
Réglage de l'inclinaison	0 à 30 degrés
Alimentation électrique	24V
Capacité de la batterie	7Ah
Étanchéité	IPX4
Nombre de mouvements de levage	40 mouvements de montée et de descente avec des batteries complètement chargées
Profondeur/hauteur du support tête/nuque	7 - 12 cm

5100 5605

Reflex 5605 chaise de douche-toilette

Cette chaise de douche-toilette réglable en hauteur constitue une solution multifonctionnelle pour les soins d'hygiène des personnes à mobilité réduite. Elle se compose d'un châssis et d'un siège ergonomique offrant à la fois confort et stabilité fonctionnelle. Les réglages électriques progressifs de la hauteur et de l'inclinaison permettent aux aidants de travailler dans des postures sûres et ergonomiques, tout en assurant aux utilisateurs un maintien et un confort constants pendant les soins. La chaise peut également s'incliner vers l'arrière jusqu'à 30°, pour davantage de sécurité et de détente.

Sa conception facilite l'utilisation des toilettes et la toilette sans transferts superflus, grâce à un système de rails permettant d'installer un bassin ou un seau collecteur. Le châssis robuste est très maniable et équipé de quatre roues pivotantes avec freins, pour garantir sécurité et stabilité pendant l'utilisation. Utilisée au chevet, dans une salle de bains ou au-dessus des toilettes, cette chaise offre aux aidants comme aux utilisateurs une combinaison harmonieuse de praticité, d'hygiène et de bien-être.



Appui-tête réglable



Roue pivotante avec frein individuel



Panneau de commande



Spécifications techniques

Charge max.	135 kg
Poids du produit	53 kg
Largeur du siège	47 cm
Profondeur du siège	44 cm
Hauteur du siège (réglable)	50 à 100 cm

 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Convient aux personnes
à mobilité modérément
réduite à fortement réduite

5100 5605

Reflex 5605 chaise de douche-toilette

En option

6960 8026
Jeu de supports de
jambes confortables.

Poignée ergonomique
pour une utilisation
fluide et légère


Accoudoirs avec
fermeture à l'avant
pour plus de sécurité

Rails de guidage
pour bassin ou seau
hygiénique

Confort d'assise ergonomique

Châssis robuste et
stable pour une
sécurité et un
soutien maximaux

Pare-chocs pour éviter
d'endommager le châssis

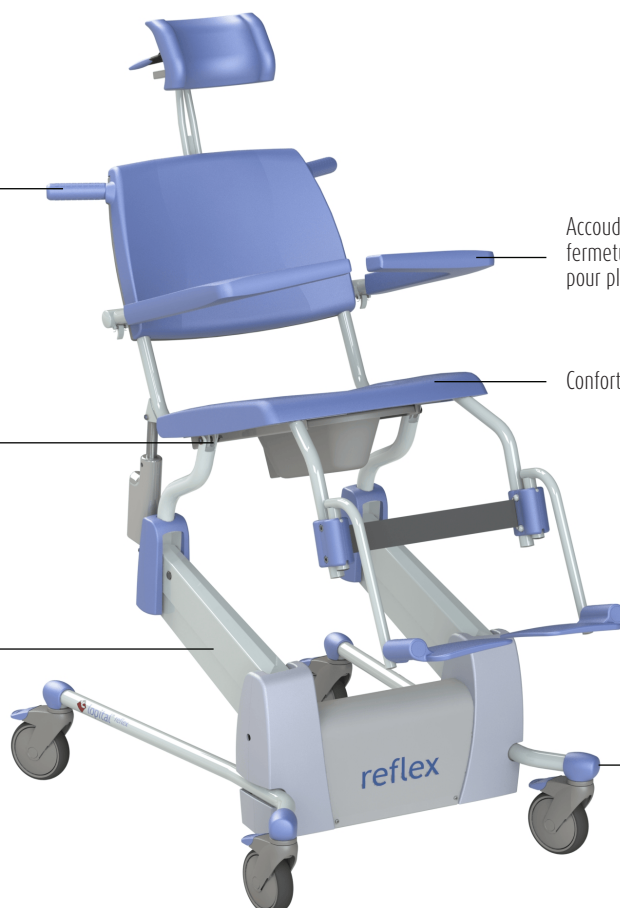

Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	106 cm
Largeur totale du châssis de base	70 cm
Rayon de braquage	120 cm
Réglage de l'inclinaison	0 à 30 degrees
Alimentation électrique	24V
Capacité de la batterie	7Ah
Étanchéité	IPX4
Nombre de mouvements de levage	40 mouvements de montée et de descente avec des batteries complètement chargées
Profondeur/hauteur du support tête/nuque	7 - 12 cm

Options

- 7056 5001 Accoudoir droit
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique
- 6975 8045 Ceinture de sécurité 4 points
- 6950 5624 Dossier Platilon
- 6950 5625 Siège Platilon Modèle en U
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables
- 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction

LFT5600-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.